

# VILLOJEKT

SET PER VILLOCENTESI  
SET FOR VILLOCENTESIS

**VILLOJEKT II** è un dispositivo utilizzato per il prelievo dei villi coriali con la tecnica del doppio ago.

## Caratteristiche del dispositivo:


- Essi sono costituiti da due aghi coassiali con una differenza di lunghezza di 5 cm: il più corto funziona da introduttore per il secondo ago con cui si effettua il prelievo
- Gli aghi sono dotati di punta non tranciante tipo Chiba a triplice o doppia affilatura. La particolare affilatura rende più veloce la penetrazione e consente il raggiungimento delle zone più profonde evitando eccessive deviazioni
- Il fermo di profondità, la centimetratura e il marker ecogeno interno rendono agevole il controllo della profondità raggiunta
- Gli aghi sono provvisti di un pratico attacco universale luer lock e di un'impugnatura trasparente che consente la visualizzazione del passaggio di liquidi

**VILLOJEKT II** are devices designed for chorionic villi sampling with double needle technique.

## Device Features:

- They consist of two coaxial needles with 5 cm length difference: the shorter needle serves as introducer for the longer needle, which takes the sample
- Needles are provided with a non cutting Chiba tip with triple or double sharpening. This special feature makes the penetration easier allowing to reach deep areas without excessive deflections
- The sliding stopper, the depth markers and the inner echogenic marker facilitate depth monitoring
- The needles are also provided with a universal luer lock connector with transparent grip for liquid flow visualization

| CODE    | DESCRIPTION               | BOX |
|---------|---------------------------|-----|
| EV 2015 | 20G x 150mm + 18G x 100mm | 20  |
| EV 2020 | 20G x 200mm + 18G x 150mm | 20  |

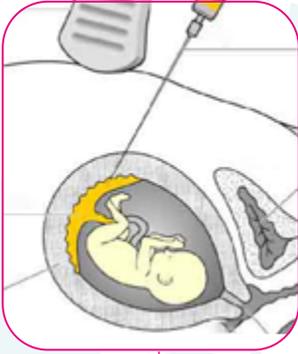

AGO A PUNTA NON TRACIANTE  
TIPO CHIBA  
NEEDLE HAS A NON CUTTING TIP  
CHIBA STYLE

