



ALM SET

REPERE PER LA LOCALIZZAZIONE
DELLE LESIONI DELLA MAMMELLA

BREAST LOCALIZATION NEEDLE

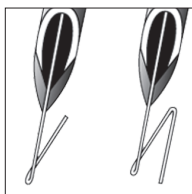

PUNTA DEL REPERE V o Z TYPE
V o Z TYPE WIRE TIP

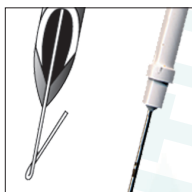

PUNTA DEL REPERE S TYPE CON CONO
ERGONOMICO "SLIM"
*S TYPE WIRE TIP WITH ERGONOMIC
"SLIM" HUB*



HS[®]
FUTUREMADEPRESENT

ALM SET

REPERE PER LA LOCALIZZAZIONE DELLE LESIONI DELLA MAMMELLA

BREAST LOCALIZATION NEEDLE

ALM SET è un ago con repere non riposizionabile per la localizzazione pre-operatoria delle lesioni non palpabili della mammella.

Caratteristiche del dispositivo:

- ago centimetrato, con punta lancet, fermo di profondità e connettore luer lock con invito ad imbuto.
- repere metallico non riposizionabile con uncino a V o Z e marker di riferimento per l'individuazione della posizione della punta del repere.
- compatibilità con sostanze coloranti.
- cono ergonomico "slim" per utilizzo con piastre di compressione in mammografia.
- cannula di irrigidimento (STIFFER) per la protezione del repere durante l'intervento chirurgico.

HS UNICA is a needle with a non-repositionable wire intended for pre-surgical localization of non-palpable breast lesions.

Device Features:

- needle with lancet tip, depth marks, depth stop and threaded luer lock connector for easy wire loading.
- non-repositionable metallic wire with V or Z anchor and reference marks to identify anchor position.
- colourant substances compatibility.
- "slim" hub for compression mammography grids.
- stiffening cannula (STIFFER) to protect the wire during the surgery.

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
ALM SET Z TYPE – uncino a Z/Z type anchor			
ALMZ 2005	20G	50mm	10
ALMZ 20075	20G	75mm	10
ALMZ 2010	20G	100mm	10
ALMZ 2015	20G	150mm	10
ALM SET V TYPE – uncino a V/V type anchor			
ALM 2005	20G	50mm	10
ALM 20075	20G	75mm	10
ALM 2010	20G	100mm	10
ALM 2015	20G	150mm	10
ALM 2105	21G	50mm	10
ALM 21075	21G	75mm	10
ALM 2110	21G	100mm	10

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
ALM SET S TYPE – uncino a V e cono slim/ V type anchor and slim hub			
ALMS 2005	20G	50mm	10
ALMS 20075	20G	75mm	10
ALMS 2010	20G	100mm	10
ALMS 2015	20G	150mm	10
ALMS 2105	21G	50mm	10
ALMS 21075	21G	75mm	10
ALMS 2110	21G	100mm	10
STIFFER			
STIFF50		per set da 50mm/for 50mm set	10
STIFF75		per set da 75mm/for 75mm set	10
STIFF100		per set da 100mm/for 100mm set	10