

HS HSG CATHETER

CATETERE PER ISTEROSALPINGOGRAFIA
ED ISTEROSONOGRRAFIA

*HYSTEROSALPINGOGRAPHY
AND HYSTEROSONOGRAPHY CATHETER*


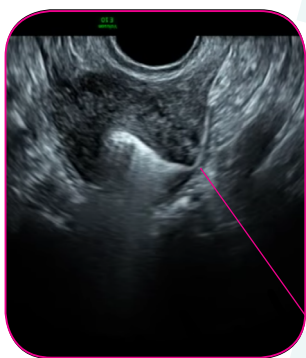


IMMAGINE ECOGRAFICA CON L'HS HSSG KIT
ULTRASOUND IMAGE USING HS HSSG KIT



HYFOSY SET

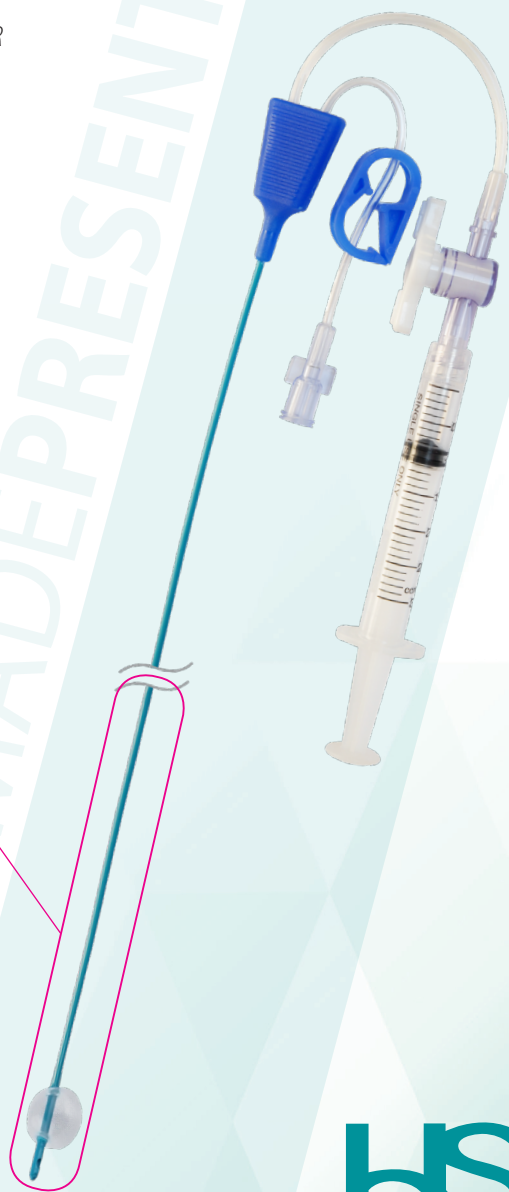

HS[®]
FUTUREMADEPRESENT

HS HSG CATHETER

CATETERE PER ISTEROSALPINGOGRAFIA ED ISTEROSONOGRRAFIA
HYSTEROSALPINGOGRAPHY AND HYSTEROSONOGRAPHY CATHETER

HS HSG CATHETER è un catetere indicato per la visualizzazione dell'utero per la diagnosi delle patologie uterine.

Caratteristiche del dispositivo:

- catetere a punta chiusa con foro laterale, radiopaco, completo di cannula coassiale di irrigidimento
- palloncino sferico
- cono a due vie: la prima, con siringa già connessa pre-caricata di aria e rubinetto, per il gonfiaggio del palloncino; la seconda per l'iniezione del mezzo di contrasto, provvista di clamp
- compatibile con soluzione salina e mezzi di contrasto
- disponibile in versione rigida o flessibile

HS HSSG KIT è un set per il controllo delle patologie uterine e della pervietà delle tube.

La soluzione fisiologica permette di eseguire la prima parte dell'esame (isterosonografia) con la distensione e la visualizzazione delle pareti dell'utero e delle strutture che appaiono bianche all'esame ecografico. La schiuma, ottenuta miscelando il gel e l'acqua, consente invece la valutazione della pervietà delle tube (HyFoSy, isterosalpingo-foam-sonografia o HyCoSy, isterosalpingo-contrasto-sonografia), con una minore necessità di ricorrere ad esami radiologici o interventi laparoscopici.

L'HS HSSG KIT contiene:

- HS HSG CATHETER

- SET con:

- siringa da 30ml con soluzione fisiologica sterile
- siringa da 10ml con gel sterile
- siringa da 10ml con acqua depurata sterile
- siringa da 20ml vuota per miscelare gel e acqua
- connettore di accoppiamento

HS HSG CATHETER is a catheter for enhanced visualization of uterine pathologies.

Device features:

- catheter with closed tip and lateral hole, radiopaque, with placement sheath
- rounded balloon
- two-way connector: the first one, with air pre-charged syringe and stopcock, for balloon inflation; the second one with clamp for contrast media injection
- saline and contrast media compatibility
- standard or flexible version

HS HSSG KIT is a set for the control of uterine diseases and tubal patency test.

The physiological solution allows to perform the first part of the exam (hysterosonography) with the distension and visualization of the walls of the uterus and of the structures that appear white to the ultrasound examination. The foam, obtained by mixing gel and water, allows the evaluation of the tubal patency (HyFoSy, isterosalpingo-foam-sonography or HyCoSy, hysterosalpingo-contrast-sonography). Less need for radiology or laparoscopy.

HS HSSG KIT includes:

- HS HSG CATHETER

- SET with:

- 30ml sterile saline solution syringe
- 10ml sterile gel syringe
- 10ml sterile purified water syringe
- 20ml empty syringe for mixing
- coupling device

CODE	DESCRIPTION	BOX
HS HSG CATHETER		
HSG 0529F	5 fr x 290mm, flessibile – palloncino 2cc	10
HSG 0729F	7 fr x 290mm, flessibile – palloncino 3.5cc	10
HSG 0529	5 fr x 290mm – palloncino 2cc	10
HSG 0729	7 fr x 290mm – palloncino 3.5cc	10

CODE	DESCRIPTION	BOX
HS HSSG KIT		
HSG 0529F-K	5 fr x 290mm, flessibile – palloncino 2cc	5
HSG 0729F-K	7 fr x 290mm, flessibile – palloncino 3.5cc	5
HSG 0529-K	5 fr x 290mm – palloncino 2cc	5
HSG 0729-K	7 fr x 290mm – palloncino 3.5cc	5