


# TRAP/IT

AGO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE

*BONE MARROW BIOPSY NEEDLE*

TRAP IT 10G allows to obtain a sample equal to the one that you would obtain with a Jamshidi needle 8G.

100% SUCCESSFULLY  
BIOPSY SAMPLING!

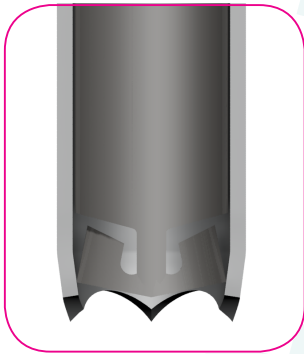

DISPOSITIVO DI INTRAPPOLAMENTO INTEGRATO  
*INTEGRATED TRAPPING DEVICE*



**HS**<sup>®</sup>  
FUTUREMADEPRESENT

# TRAP IT

AGO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE  
BONE MARROW BIOPSY NEEDLE

**TRAP IT** è l'unico ago per biopsia osseo-midollare che intrappola il campione e ne assicura il prelievo al 100%.

## Caratteristiche del dispositivo:

- ago cilindrico, centimetrato, con punta a corona per una facile penetrazione del tessuto osseo, con impugnatura ergonomica con connettore luer lock che consente di distribuire la forza su tutto il palmo della mano e non localmente
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con punta piramidale a tre facce
- dispositivo per l'intrappolamento del campione integro, caratterizzato da un particolare disegno che consente di imprigionare il frustolo, eliminando la manovra di lussazione
- filo di estrazione a punta smussa, centimetrato, indicato per il recupero del campione
- tappo di protezione ("safety") indicato per ricoprire la punta dell'ago ed evitare pericoli per l'operatore
- tappo luer lock indicato per chiudere l'ago evitando la fuoriuscita di sangue
- dispositivo luer lock per aspirazione citologica post biopsia

**TRAP IT** is the only bone-marrow biopsy needle which traps the sample ensuring its complete removal.

## Device Features:

- cylindrical needle with crown tip (to easily penetrate the bone), depth marks and ergonomic handle with luer lock connector (it ensures safe grip and manoeuvrability and force distribution on the palm of the hand)
- removable stylet with pyramidal tip
- integrated device designed to trap the sample into the needle avoiding the deflection technique
- extraction wire with blunt tip intended for sample retrieval
- safety cap intended for needle tip covering to avoid damages for personnel
- luer lock stopper
- luer lock device for post biopsy cytological aspiration

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
TRAPIT 0810	8G	100mm	10
TRAPIT 0815	8G	150mm	10
TRAPIT 1010	10 G	100mm	10
TRAPIT 1015	10 G	150mm	10
TRAPIT 1110	11G	100mm	10
TRAPIT 1115	11G	150mm	10